


## วิธีการใช้งานโปรแกรม Send DICOM to PACS [version 0.1]

1. เลือกไฟล์ DICOM ที่ต้องการส่งขึ้น PACS ดังนี้
  - 1.1 กดปุ่ม Select DICOM
  - 1.2 เลือกไฟล์เตอร์ที่มีไฟล์ DICOM
  - 1.3 กดปุ่ม Open

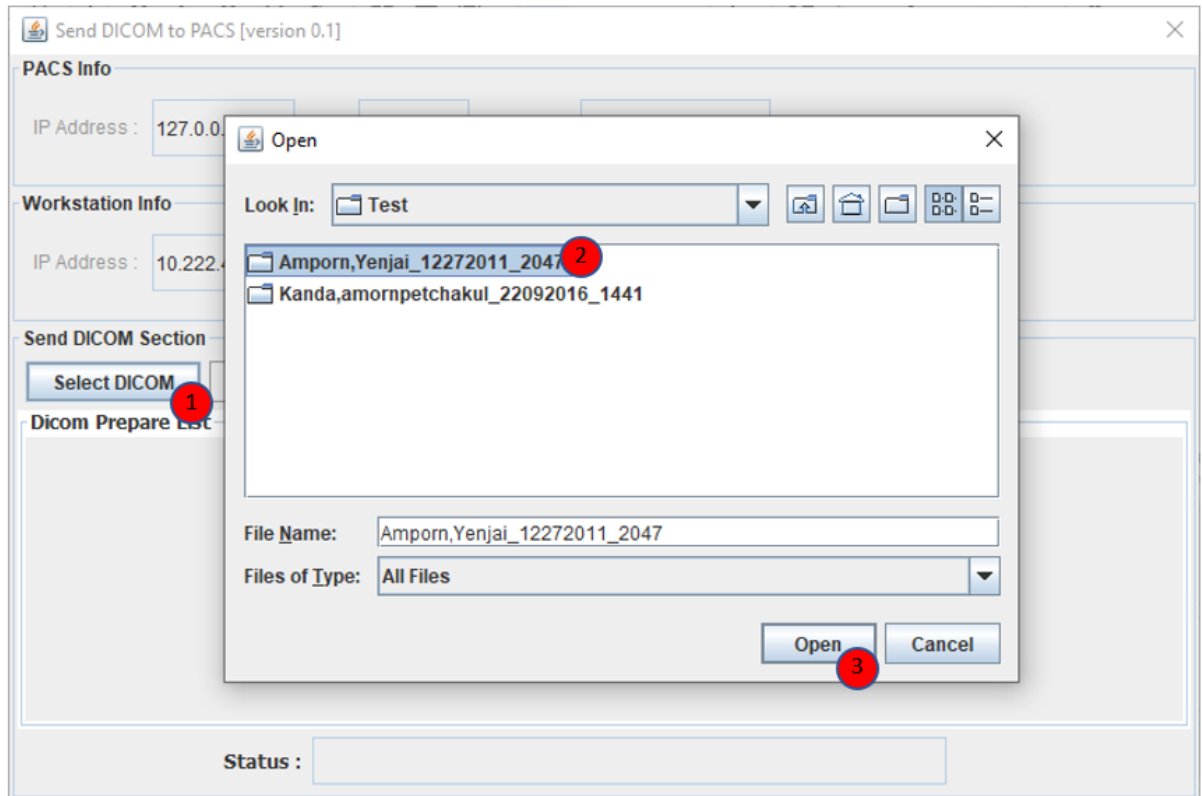

2. ไฟล์ DICOM ที่ต้องการส่งขึ้น PACS จะแสดงอยู่ในตาราง จากนั้นให้กดปุ่ม Send DICOM

**Send DICOM to PACS [version 0.1]**

**PACS Info**

IP Address : 127.0.0.1 Port : 11112 AE Title : DCM4CHEE

**Workstation Info**

IP Address : 10.222.46.245 Port : 11112 AE Title : NECTEC01

**Send DICOM Section**

Select DICOM **Send DICOM**

**Dicom Prepare List**

Index	Path	Status
1	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_000.dcm	PREPARE
2	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_001.dcm	PREPARE
3	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_002.dcm	PREPARE
4	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_003.dcm	PREPARE
5	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_004.dcm	PREPARE
6	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_005.dcm	PREPARE
7	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_006.dcm	PREPARE
8	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_007.dcm	PREPARE

Status :

3. โปรแกรมจะใช้เวลาส่งภาพและอัปเดตจำนวนไฟล์ที่ส่งสำเร็จ ดังรูป

**Send DICOM to PACS [version 0.1]**

**PACS Info**

IP Address : 127.0.0.1 Port : 11112 AE Title : DCM4CHEE

**Workstation Info**

IP Address : 10.222.46.245 Port : 11112 AE Title : NECTEC01

**Send DICOM Section**

Select DICOM Send DICOM

**Dicom Prepare List**

Index	Path	Status
1	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_000.dcm	OK
2	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_001.dcm	OK
3	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_002.dcm	OK
4	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_003.dcm	OK
5	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_004.dcm	OK
6	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_005.dcm	OK
7	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_006.dcm	OK
8	D:\Test\Amporn,Yenjai_12272011_2047\dicom\Amporn,Yenjai_12272011_2047_007.dcm	OK

Status : Complete [118|324]